

Tonomètre à air

CT-800



CT-800

TONOMÈTRE À AIR

Opération simple

Topcon est fier de vous présenter son tonomètre à air CT-800 qui intègre la toute dernière technologie. L'appareil est doté d'un écran tactile lumineux de 8,5 pouces pour contrôler les fonctions principales. Le

poids de l'appareil a été réduit de 22% par rapport au modèle précédent, ce qui le rend plus maniable pour l'opérateur. Le jet d'air est léger, ce qui induit moins de stress sur l'oeil.

CARACTÉRISTIQUES

- » Opération simple
- » Design compact et moderne
- » Écran de contrôle tactile couleur 8,5 pouces
- » Jet d'air doux
- » Valeur de tonométrie ajustée*
- » Connexion LAN



OPÉRATION SOUPLE

La réduction de poids du CT-800 ainsi que la motorisation du mouvement de montée/descente, contribuent à son excellente maniabilité.



ECRAN DE CONTRÔLE TACTILE COULEUR 8,5"

Le CT-800 est équipé d'un écran de contrôle tactile couleur qui permet une lecture claire des différentes icônes au cours de la prise de mesures.



JET D'AIR DOUX

Le logiciel contrôle la quantité d'air optimale requise individuellement pour chaque oeil et chaque mesure. Un jet d'air pulsé plus doux résulte en une diminution du stress chez les patients et en une meilleure coopération au cours de l'examen.

VALEUR DE TONOMÉTRIE AJUSTÉE*

Le CT-800 est capable de calculer la valeur de tonométrie ajustée à partir de la mesure de tonométrie mesurée, si l'on renseigne manuellement la mesure de l'épaisseur cornéenne calculée avec un autre appareil tel qu'un pachymètre.




* La valeur ajustée de tonométrie est la valeur de référence

MODE IMPLANT

Ce mode permet d'effectuer des mesures sur un oeil implanté.

IMPRIMANTE INTÉGRÉE ET PROTECTION DU BEC

Le CT-800 est équipé d'une imprimante thermique intégrée qui fonctionne avec un rouleau de papier facilement remplaçable. Le ticket est coupé automatiquement en fin d'impression. Le couvercle de protection pour le bec se positionne aisément sur le CT-800.

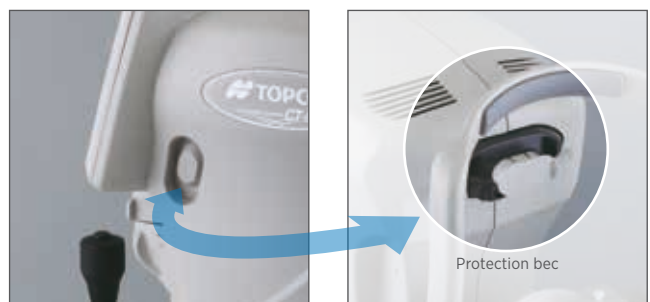

Caractéristiques

Plage de mesure de la pression oculaire	1 à 60 mmHg (pas de 1 mm Hg) Indication moyenne 1 mmHg / 0,1 mmHg (pas modifiables)
Mode de mesure	1-30 mmHg / 1-60 mmHg
Ecran	Ecran couleur LCD tactile 8,5" WVGA
Transmission de données	USB (Import), RS232C (Export), LAN (Export)
Dimensions	317 - 341mm(L) x 521 - 538mm(P) x 437 - 467mm(H)
Poids	14.0 kg
Alimentation	100-240V AC, 50-60Hz, 30-70VA

Transfert de données



* contacter votre distributeur local pour la configuration de votre système

Données imprimées

2014_02_14		AM 10:37	
TONO. DATA			
(R)	mmHg	ADJ.	(L) mmHg
17	17	17	17
16	16	16	16
17	17	17	17
AVG.			
16.7	16.7	16.7	16.7
PACH. DATA			
(R)	mm	(L)	mm
0.535		0.532	
TOPCON			

- 1 Valeur de tonométrie en "mmHg"
- 2 Valeur de tonométrie ajustée
- 3 Valeur de tonométrie moyenne en "mmHg"
- 4 Valeur de Pachymétrie renseignée manuellement



IMPORTANT

Ce document présente le tonomètre à air CT-800 qui est un dispositif médical de classe IIa destiné à mesurer la tension oculaire. Les informations contenues dans ce document sont destinées aux professionnels de santé. Lire attentivement les instructions figurant sur le mode d'emploi avant utilisation de cet appareil. Une formation au CT-800 est requise avant utilisation du dispositif. Examen pris en charge par l'assurance maladie dans certaines conditions. Fabricant : Topcon Corporation Distributeur : Topcon France

Topcon Europe Medical B.V.
Essebaan 11; 2908 LJ Capelle a/d IJssel; P.O. Box 145;
2900 AC Capelle a/d IJssel; The Netherlands
Phone: +31-(0)10-4585077; Fax: +31-(0)10-4585045
E-mail: medical@topcon.eu; www.topcon-medical.eu

Topcon España S.A.
HEAD OFFICE; Frederic Mompou, 4;
08960 Sant Just Desvern; Barcelona, Spain
Phone: +34-93-4734057; Fax: +34-93-4733932
E-mail: medica@topcon.es; www.topcon.es

Topcon Deutschland GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41;
D-47877 Willich, Germany
Phone: (+49) 2154-885-0; Fax: (+49) 2154-885-177
E-mail: med@topcon.de; www.topcon.de

Topcon Ireland
Unit 276, Blanchardstown; Corporate Park 2
Ballycoolin; Dublin 15, Ireland
Phone: +353-18975900; Fax: +353-18293915
E-mail: medical@topcon.ie; www.topcon.ie

Topcon Danmark
Praestemarksvej 25; 4000 Roskilde, Danmark
Phone: +45-46-327500; Fax: +45-46-327555
E-mail: info@topcondanmark.dk
www.topcondanmark.dk

Topcon Italy
Viale dell' Industria 60;
20037 Paderno Dugnano, (MI) Italy
Phone: +39-02-9186671; Fax: +39-02-91081091
E-mail: info@topcon.it; www.topcon.it

Topcon Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 23; 42-470 Siewierz; Poland
Phone: +48-(0)32-670-50-45; Fax: +48-(0)32-671-34-05
www.topcon-polska.pl

Topcon Scandinavia A.B.
Neogatatan 2; P.O. Box 25; 43151 Mölndal, Sweden
Phone: +46-(0)31-7109200; Fax: +46-(0)31-7109249
E-mail: medical@topcon.se; www.topcon.se

Topcon France
BAT A1; 3 route de la révolte, 93206 Saint Denis Cedex
Phone: +33-(0)1-49212323; Fax: +33-(0)1-49212324
E-mail: topcon@topcon.fr; www.topcon.fr

Topcon (Great Britain) Ltd.
Topcon House; Kennet Side; Bone Lane; Newbury
Berkshire RG14 5PX; United Kingdom
Phone: +44-(0)1635-551120; Fax: +44-(0)1635-551170
E-mail: medical@topcon.co.uk; www.topcon.co.uk